




HyFlex®, cambiando el ADN del NiTi

Mayor control en sus manos

- HyFlex CM® - Limas con memoria controlada
- HyFlex® NT - Limas NiTi
- HyFlex® GPF - Limas Glide Path

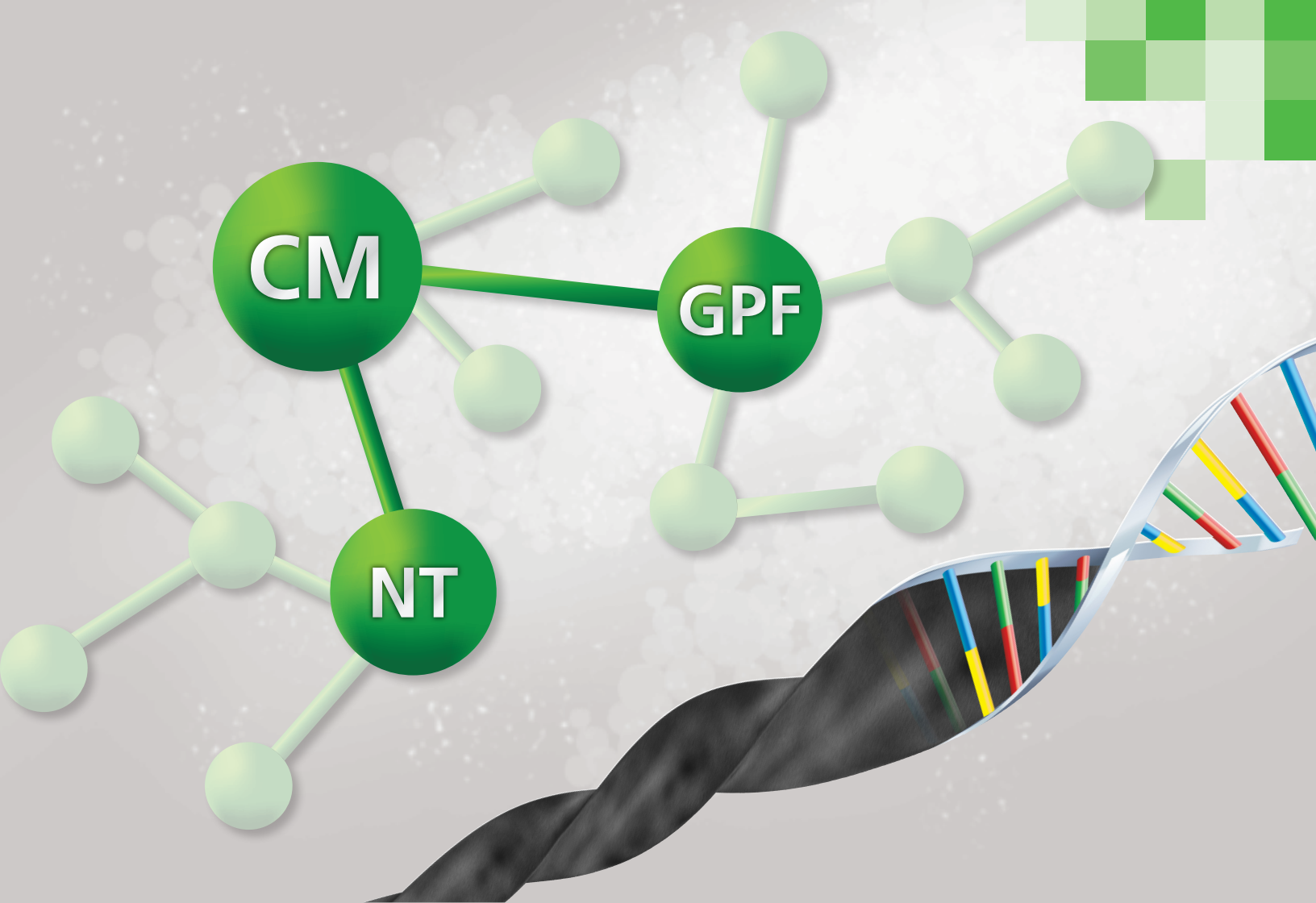


HyFlex CM[®]

limas niti con memoria controlada

Cambiando el ADN del NiTi

300% más resistencia a la “fractura”


Las limas NiTi de HyFlex CM[®] con memoria controlada son hasta un 300% más resistentes a la fatiga cíclica en comparación con otras limas NiTi*, lo que ayuda a disminuir considerablemente la incidencia de la separación de la lima.

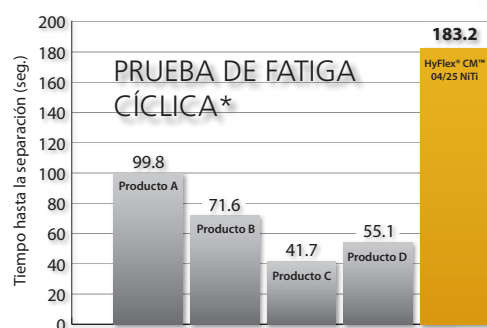

* Fuente: pruebas presenciales, a 300 rpm con simulación de canal radicular de 30 grados


Sin memoria + flexibilidad extrema = seguimiento superior del canal

Las limas NiTi HyFlex[®] con memoria controlada se fabrican mediante un proceso exclusivo que controla la memoria del material, haciendo que las limas sean sumamente flexibles pero sin la memoria de forma presente en otras limas NiTi. Esto otorga a HyFlex CM la capacidad para seguir bien la anatomía del canal, reduciendo el riesgo de formación de escalones, movimientos o perforación.

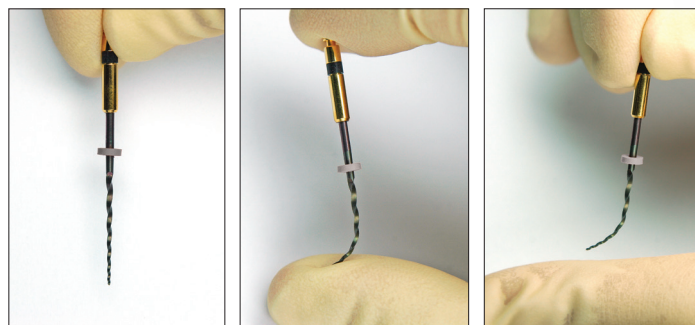


Recupera su forma luego de la esterilización = Multiuso

El diseño de espirales de HyFlex CM puede ser restaurado sometiéndose a un proceso de autoclavado; recuperando forma y capacidad de corte. De esta forma, permite una reutilización mayor a otros sistemas. Indicador visual de descarte cuando no recupera su forma original.

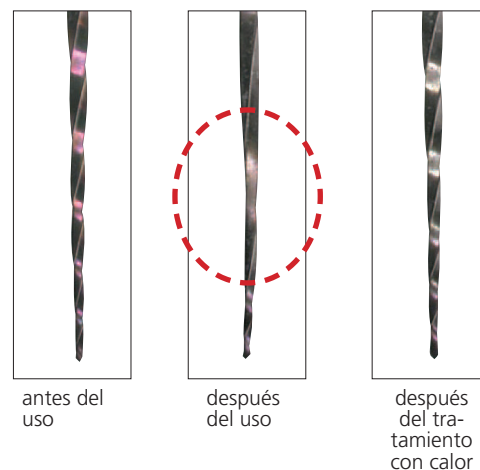

Use su técnica o pruebe la nuestra

Las limas HyFlex CM® se pueden usar con la técnica crown-down, step-back o nuestra técnica recomendada de longitud única.

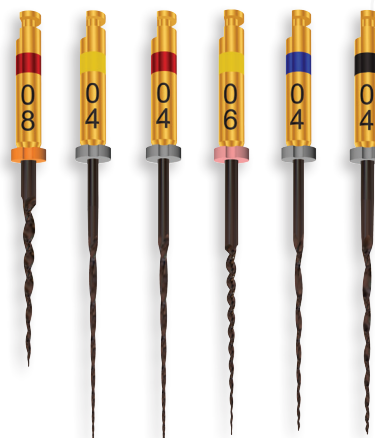

Opinión de los profesionales



Dr. Santiago Frajlich
Buenos Aires, Argentina



Dr. Rajesh Iyer
Maharashtra, India



Dr. Sam Alborz
Knoxville, TN, EE. UU.



Dr. David Uroz Torres
Almería, España

Testimonios

"Me resultan fáciles de usar, especialmente en zonas con acceso limitado porque se pueden doblar. Al ser más flexibles, al trabajar en un canal las limas no se fuerzan tanto. También es bueno que se advierte de antemano cuando uno está forzando de más las limas al ver si su espiral se estira. No se me ha fracturado ninguna de estas limas y seguiré usándolas." **Dr. Alan Swett, Johnston, Iowa**

"La transición de las limas rotativas grandes de Tulsa a HyFlex® CM™ fue simple y sin contratiempos."

Dr. Timothy Kneller, Aurora, Colorado

"La NiTi más flexible que he visto. Ahora que me estoy acostumbrando a ellas, me gustan y podría adoptarlas como nuestros instrumentos principales." **Dr. Gary Henkel, Filadelfia, Pensilvania**

"Desde que me presentaron la lima HyFlex®, puedo decir francamente que realmente tengo una confianza certera para atacar 'CUALQUIER' canal curvo que vea sin temor a la separación. Veo que con la flexibilidad y un seguimiento superior del canal, todo el procedimiento del canal radicular se acelera, permitiéndome así atender a más pacientes. Asimismo, también estoy impresionado de lo bien que encajan las SpectraPoints en la 'marca' la primera vez, y así eso también me ahorra un tiempo esencial." **Dr. Joseph Braud, New Iberia, Los Ángeles**

Visite **HyFlexCM.com** para ver videos del producto



Información sobre pedidos

19 mm envase de 6

H8190825 08/25

21 mm envases de 6

H8210415 04/15

H8210420 04/20

H8210425 04/25

H8210430 04/30

H8210435 04/35

H8210440 04/40

H8210445 04/45

H8210450 04/50

H8210460 04/60

H8210620 06/20

H8210625 06/25

H8210630 06/30

H8210635 06/35

H8210640 06/40

H821ASST Kit Single Length

H821SML Kit Crown Down Small

H821MED Kit Crown Down Medium

H821LRG Kit Crown Down Large

25 mm envases de 6

H8250415 04/15

H8250420 04/20

H8250425 04/25

H8250430 04/30

H8250435 04/35

H8250440 04/40

H8250445 04/45

H8250450 04/50

H8250460 04/60

H8250620 06/20

H8250625 06/25

H8250630 06/30

H8250635 06/35

H8250640 06/40

H825ASST Kit Single Length

H825SML Kit Crown Down Small

H825MED Kit Crown Down Medium

H825LRG Kit Crown Down Large

31 mm envases de 6

H8310415 04/15

H8310420 04/20

H8310425 04/25

H8310430 04/30

H8310435 04/35

H8310440 04/40

H8310445 04/45

H8310450 04/50

H8310460 04/60

H8310620 06/20

H8310625 06/25

H8310630 06/30

H8310635 06/35

H8310640 06/40

60018460 Kit Single Length

H831SML Kit Crown Down Small

H831MED Kit Crown Down Medium

H831LRG Kit Crown Down Large

Espirales X-TRA

60018441 06/20 21 mm

60018442 06/25 21 mm

60018443 06/20 25 mm

60018444 06/25 25 mm

60018445 06/20 31 mm

60018446 06/25 31 mm

60018455 Surtido

H8INTROKIT Kit de limas inicial HyFlex CM®,

Envases con surtido de 6 limas (2-21 mm, 4-25 mm); puntas Gutta-Percha Spectra Point® GT, 1 bloque de procedimiento endo, 3 bloques de práctica de lima endo, CD, tarjeta paso a paso

H8101 Bloques de práctica Endo:

3 bloques acrílicos de práctica

H8102 Bloque de procedimiento endo

60018783 Organizador HyFlex®



CONTENIDO DE LOS KITS SURTIDOS

Kit Single Length HyFlex CM® y HyFlex® NT

1 lima de cada uno: 08/25 19 mm; 04/20; 04/25; 06/20; 04/30; 04/40

Kit Crown Down Small

1 lima de cada uno: 08/25 19 mm; 04/35; 04/30; 04/25; 04/20; 04/15

Kit Crown Down Medium

1 lima de cada uno: 08/25 19 mm; 04/60; 04/50; 04/45; 04/40; 04/35

Kit Crown Down Large

1 lima de cada uno: 08/25 19 mm; 06/40; 06/35; 06/30; 06/25; 06/20

Kit X-TRA Espirales de 25 mm HyFlex CM®

1 lima de cada una: 08/25NT, espirales X-TRA 06/20, 06/25, 06/30, 04/35, 04/40

HyFlex[®] GPF[™]

LIMAS GLIDE PATH



Un recorrido establecido puede disminuir el esfuerzo por torsión y aumentar la duración del instrumento rotatorio usado para preparar el canal. También puede disminuir las probabilidades de desplazamiento y formación de escalones que suelen suceder con los instrumentos manuales y disminuir la fatiga en las manos ahorrando un valioso tiempo en el consultorio. GPF de HyFlex le permitirá al profesional reducir el tiempo de trabajo en forma rápida y eficaz. Su diseño permite ajustar la longitud de trabajo para la ubicación controlada en el tercio apical. Limas GPF[™] con memoria controlada de HyFlex[®] hacen un buen seguimiento en el tercio apical y permiten preparaciones más seguras y eficaces. Disponibles en 21, 25 y 31 mm de largo.

21 mm envases de 6

HGPF8211501 Lima **Navigator NT** 15/01 con ranura de 10 mm

HGPF8211502 Lima **CM K** 15/02 con ranura de 16 mm*

HGPF8212002 Lima **CM K** 20/02 con ranura de 16 mm*

HGPF821ASST **El surtido de limas** contiene:

(2) GPF Navigator NT 15/01 con ranura de 10 mm

(2) limas GPF CM K 15/02 con ranura de 16 mm*

(2) limas GPF CM K 20/02 con ranura de 16 mm*

25 mm envases de 6

HGPF8251501 Lima **Navigator NT** 15/01 con ranura de 10 mm

HGPF8251502 Lima **CM K** 15/02 con ranura de 16 mm*

HGPF8252002 Lima **CM K** 20/02 con ranura de 16 mm*

HGPF825ASST **El surtido de limas** contiene:

(2) GPF Navigator NT 15/01 con ranura de 10 mm

(2) limas GPF CM K 15/02 con ranura de 16 mm*

(2) limas GPF CM K 20/02 con ranura de 16 mm*

31 mm envases de 6

HGPF8311501 Lima **Navigator NT** 15/01 con ranura de 10 mm

HGPF8311502 Lima **CM K** 15/02 con ranura de 16 mm*

HGPF8312002 Lima **CM K** 20/02 con ranura de 16 mm*

HGPF831ASST **El surtido de limas** contiene:

(2) GPF Navigator NT 15/01 con ranura de 10 mm

(2) limas GPF CM K 15/02 con ranura de 16 mm*

(2) limas GPF CM K 20/02 con ranura de 16 mm*

HyFlex[®] NT[™]

LIMAS NITI



La lima endodóntica NiTi HyFlex[®] NT[™] está diseñada para trabajar en situaciones clínicas específicas, como canales calcificados, canales rectos, retratamientos y remoción de Gut-ta-Percha. Las limas HyFlex[®] NT[™] vienen en medidas 0,06 y 0,04, en 21 mm, 25 mm y 31 mm de largo.

19 mm envases de 6

HNT8190825 Lima **HYFLEX[®] NT[™]** 08/25

21 mm envases de 6

HNT8210415	04/15	HNT8210450	04/50
HNT8210420	04/20	HNT8210460	04/60
HNT8210425	04/25	HNT8210620	06/20
HNT8210430	04/30	HNT8210625	06/25
HNT8210435	04/35	HNT8210630	06/30
HNT8210440	04/40	HNT8210635	06/35
HNT8210445	04/45	HNT8210640	06/40

HNT821SML Kit Crown Down Small

HNT821MED Kit Crown Down Medium

HNT821LRG Kit Crown Down Large

25 mm envases de 6

HNT8250415	04/15	HNT8250450	04/50
HNT8250420	04/20	HNT8250460	04/60
HNT8250425	04/25	HNT8250620	06/20
HNT8250430	04/30	HNT8250625	06/25
HNT8250435	04/35	HNT8250630	06/30
HNT8250440	04/40	HNT8250635	06/35
HNT8250445	04/45	HNT8250640	06/40

HNT825SML Kit Crown Down Small

HNT825MED Kit Crown Down Medium

HNT825LRG Kit Crown Down Large

31 mm envases de 6

HNT8310415	04/15	HNT8310450	04/50
HNT8310420	04/20	HNT8310460	04/60
HNT8310425	04/25	HNT8310620	06/20
HNT8310430	04/30	HNT8310625	06/25
HNT8310435	04/35	HNT8310630	06/30
HNT8310440	04/40	HNT8310635	06/35
HNT8310445	04/45	HNT8310640	06/40

HNT831SML Kit Crown Down Small

HNT831MED Kit Crown Down Medium

HNT831LRG Kit Crown Down Large


*Limas NiTi con memoria controlada

Información sobre pedidos

Limas manuales HyFlex® X-File™

H08438 Kit inicial de limas manuales HyFlex® X-File™ de níquel y titanio

Contiene: 1 envase de seis de cada tamaño: N.º 15 - N.º 40
(todos 25 mm), 1 de cada tamaño (surtido): N.º 15 - N.º 40 (todos 25 mm)

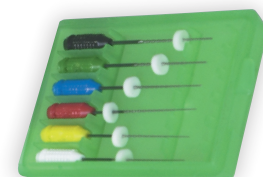

Acero inoxidable (21 mm), caja de 6

H08371 #08
H08372 #10

(25 mm), caja de 6

H08393 #08
H08394 #10

Níquel y titanio (21 mm), caja de 6

H08374 #15 H08386 #50
H08376 #20 H08387 #55
H08378 #25 H08388 #60
H08380 #30 H08389 #70
H08382 #35 H08390 #80
H08384 #40 H08391 #15 - #40
H08385 #45 H08392 #45 - #80

Níquel y titanio (25 mm), caja de 6

H08396 #15 H08408 #50
H08398 #20 H08409 #55
H08400 #25 H08410 #60
H08402 #30 H08411 #70
H08404 #35 H08412 #80
H08406 #40 H08413 #15 - #40
H08407 #45 H08414 #45 - #80

Puntas Hygenic Greater Taper Gutta-Percha

(Tamaños ISO y codificadas por color)

Conicidad 0,04, caja de 60

60014099 .04 #20
60014100 .04 #25
60014101 .04 #30
60014102 .04 #35
60014103 .04 #40
60014104 .04 #45

Conicidad 0,06, caja de 60

60014106 .06 #20
60014107 .06 #25
60014108 .06 #30
60014109 .06 #35
60014110 .06 #40
60014111 .06 #45

60014105 Caja de 60 - Surt.
Greater Taper
Conicidad 0,04 #20 - #45)

60014112 Caja de 60 - Surt.
Greater Taper
Conicidad 0,06 #20 - #45)



GuttaFlow® 2 Guttapercha fluída y en frío.

60013701 GuttaFlow® 2 set estándar Automix

(contiene: 1 jeringa con doble cilindro, 12 puntas de mezcla, 1 bloque de mezcla)

60013745 GuttaFlow® 2 jeringa con doble cilindro, envase de recarga

(contiene: 1 jeringa con doble cilindro)

60013719 GuttaFlow® 2 Automix - Puntas para mezcla

(contiene 24 puntas)

349100 RoekoSeal Automix - Set STD

349102 RoekoSeal Automix - Envase de recarga

349105 RoekoSeal Automix - Puntas para mezcla


(contiene 24 puntas)

349103 RoekoSeal UniDose

(contiene 40 unidades)



Productos destacados

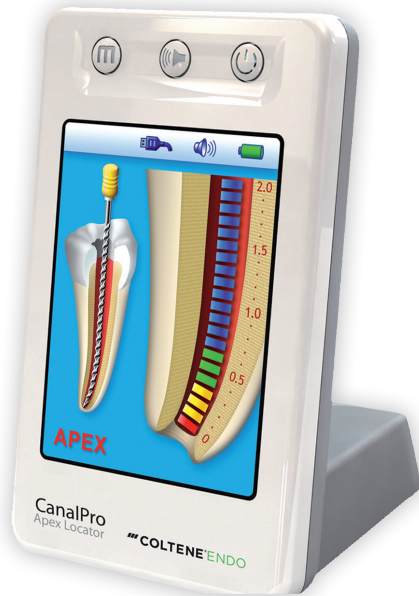

CanalPro® Apex Locator

El Localizador de ápice CanalPro (Apex Locator) se caracteriza por su pantalla gráfica color brillante TFT-LCD, y su medición exacta. El diseño ergonómico y fácil manejo permiten su comodidad de uso.

- Exactitud de medición
- Interfaz inteligente y de uso fácil
- Función de ápice virtual
- Auto test incorporado para un control de función rápida

Localizador de ápice CanalPro (60018737)

Contiene: cable de medición, clips de lima (2), sonda táctil (1), gancho labial (5), adaptador de CA, batería recargable



CanalPro® CL 2


Pieza de mano inalámbrica

- Diseño ergonómico delgado para un mejor acceso en zonas difíciles de alcanzar
- Panel LCD grande, de uso simple
- Memoria de hasta 5 programas
- 6 posiciones del cabezal contra ángulo
- Funciona en forma continua durante aprox. 80 minutos con su carga máxima
- Ahorro de energía, se apaga si no se utiliza por 10 minutos
- El cabezal contra ángulo se puede colocar en autoclave a 135° C
- Velocidad de rotación (min-1): 140 ~ 550, nivel de par de torsión (N-cm): 0,3 ~ 3,0

Set completo CanalPro CL 2 (60018361)

Contiene: pieza de mano con motor CanalPro CL 2, contra ángulo 16:1 CanalPro CL 2, cargador CanalPro CL 2

Coltene® Endo se encarga de todo, de principio a fin

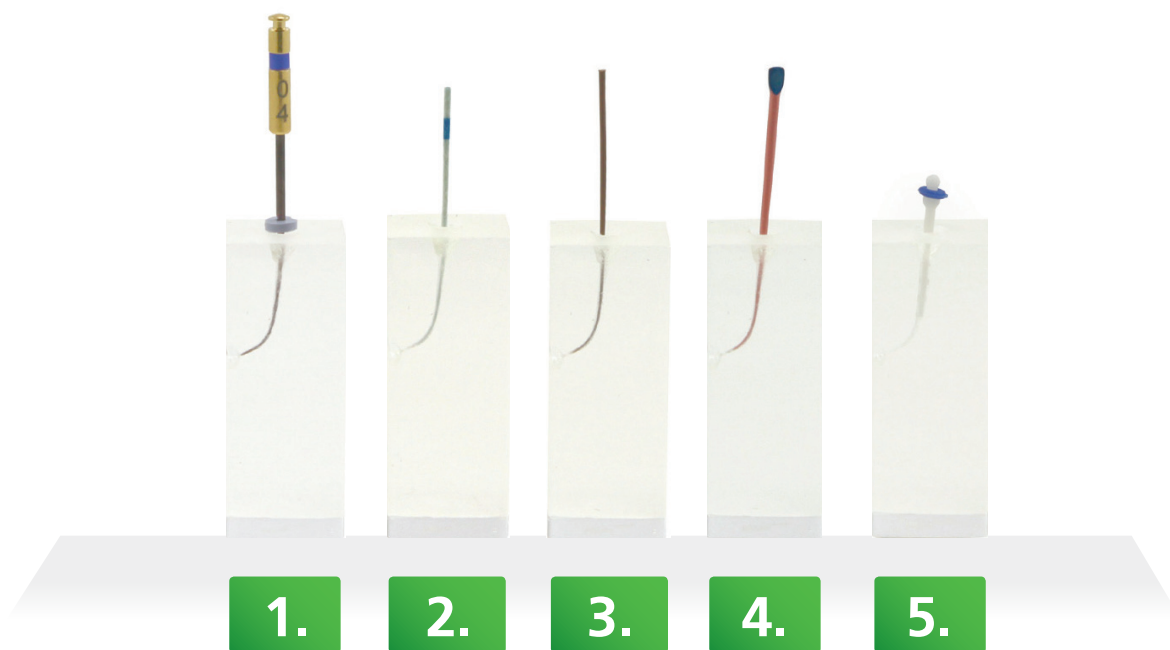

1. Conformación

HyFlex® X-File
Lima CM HyFlex®
Lima NT HyFlex®
Lima GPF HyFlex®

2. Secado

Puntas de papel Hygenic
Puntas de papel Roeko® TopColor
Roeko Surgitip-Endo

3. Tratamiento temporal

Puntas de hidróxido de calcio
Coltosol® F
DuoTemp®

4. Obturación

Puntas Gutta-Percha Hygenic
Puntas Greater Taper Hygenic
GuttaFlow® 2
RoekoSeal

5. Sistemas de postes / Reconstrucción de muñón

ParaPost Fiber Lux® Plus
ParaPost Taper Lux® Plus
ParaPost® PDMT & PDL
Tenax Fiber Trans® Plus
ParaCore®
SoloCem®

*RotoMix™ no es una marca comercial de Coltène/Whaledent Inc. -Patente en trámite para HyFlex® CM™.

 **Coltène/Whaledent Inc.**
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, OH 44223 / EE. UU.
info.us@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Suiza
info.ch@coltene.com

 **Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG**
Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau / Alemania
info.de@coltene.com

 **COLTENE**

coltene.com
contacto@coltenelatinoamerica.com

Síguenos en

